



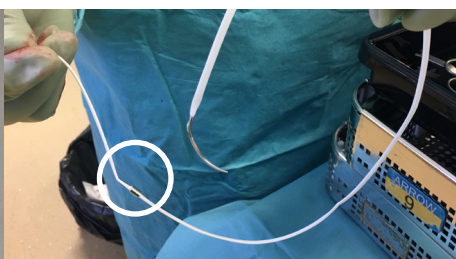

FICHE TECHNIQUE

CERCLAGE SOUPLE
AIGUILLÉ

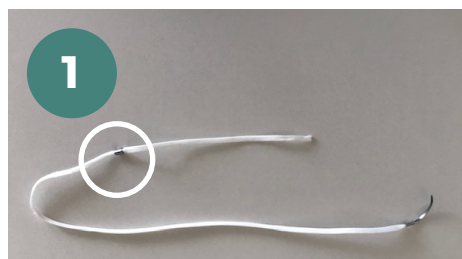


1
Sur table opératoire, positionner 1 ou 2 douilles
à 10 cm de l'extrémité non aiguillée.
Bien dégager les parties molles de l'os avec une rugine.

Préhension du Strapflex
avec la pince


2 possibilités :

Partie aiguillée
Partie non-aiguillée


Préhension côté aiguillé

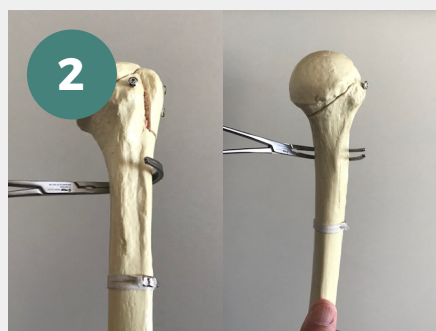

2
Passer la pince autour de la
diaphyse, écarter les mords.

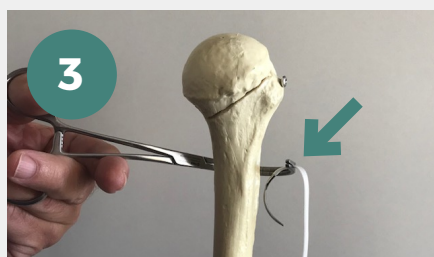

3
L'aide opératoire positionne
le Strapflex dans la partie
tissulaire, **côté aiguillé à 1 cm**
de l'aiguille.

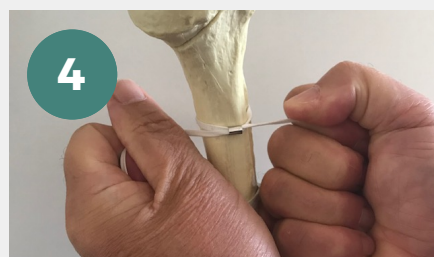

4
Tirer pour faire venir l'aiguille.
Passer l'aiguille dans la douille
et serrer manuellement le
Strapflex contre l'os.

Préhension côté non-aiguillé



2
Prendre le Strapflex **côté non**
aiguillé, pincer la bandelette.



3
Passer la pince autour
de la diaphyse.



4
Tirer pour faire venir l'aiguille.
Passer l'aiguille dans la douille
et serrer manuellement le
Strapflex contre l'os.



StrapFlex

FICHE TECHNIQUE

CERCLAGE SOUPLE
AIGUILLÉ



5
Rapprocher la crémaillère au plus près de la fourche.



6
Mettre les 2 brins dans chaque mord de la fourche.



7
Mettre en tension en maintenant les bandelettes vers le bas.



8
Evaluer la tension (cordes de guitares).



9
Sertir.

10. Retirer le tenseur

11. Couper les brins

12. S'il y a une seule douille, par sécurité, sertir à nouveau

GROUPE
FH
ORTHO

FR, FH ORTHOPEDICS
3 rue de la Forêt
68990 HEIMSBRUNN - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
orthopedie@fhorthopedics.fr
www.fhortho.com

USA, FH ORTHO INC.
4908 N. Elston
Chicago - IL 60630 - USA
Tel.: +1 (773) 290 1039 / 844-77 FHINC
Fax: +1 (708) 667 7618
info-us@fhorthopedics.com
www.fhortho.com

UK, FH ORTHO LTD
Suite C, Ground Floor, Conwy House
Castle Court, Swansea, SA7 9LA - UK
Tel.: +44 (0) 1792 464792
Fax: +44 (0) 844 412 7674
customer-servicesUK@fhorthopedics.com
www.fhortho.com

POLSKA, IMPLANTS INDUSTRIE
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Tel: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com